

Orcheo LITE





La performance portable

Après des années de recherche et développement, Sonoscanner est fier de vous présenter Orcheo Lite, la nouvelle génération d'échographe portable.

Développé en prenant vos besoins en compte avant tout, Orcheo Lite c'est une plateforme ultraportable offrant des performances jusque là réservées aux échographes mobiles haut de gamme.

Parce que nous savons que l'amélioration de la portabilité ne doit pas se faire au détriment de la performance, Orcheo Lite offre une qualité d'image vous permettant de réaliser des diagnostics fiables en tout temps et en tout lieu.

Bénéficiant des modes d'imagerie les plus avancées (THI, Compound Imaging, Power and Directional Power...), l'Orcheo Lite est la réponse à vos exigences les plus pointues sur de multiples applications cliniques.

Son interface conviviale et simple d'utilisation fait accéder l'imagerie à ultrason à un nouveau degré de productivité en vous permettant de réaliser des examens plus rapides et plus sûrs.

Orcheo Lite, c'est la polyvalence et la performance où que vous soyez. Acteur à part entière du développement de la technologie à ultrason, Sonoscanner continuera de façonner avec vous le futur de l'imagerie médicale à ultrason.

Caractéristiques Techniques

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- écran: Haute résolution 15" LCD
- Poids: 5,5kg
- Dimensions: 42cm X 37cm X 8.5cm
- Batterie rechargeable. Autonomie: 1h30 en fonctionnement
- Réglages personnalisables
- Démarrage rapide
- Capacité de stockage : 250Go SSD (images, cine loop)
- 2 Ports USB 3.0
- Port Ethernet
- Port PS/2
- Réplication sur écran extérieur via sortie VGA
- Chariot dédié ultra maniable pour une plus grande mobilité

MODES D'IMAGERIE

- Mode B (2D)
- Mode TM
- Doppler Pulsé (PW)
- Doppler Couleur
- Doppler Energie
- Doppler Directionnel Energie
- Mode Duplex
- Mode Triplex
- Imagerie Harmonique tissulaire
- Imagerie trapézoïdale
- **Options Panoramique et Elastographie**
- **Option 3D/4D**

APPLICATIONS CLINIQUES

Radiologie, Obstétrique, Gynécologie, Parties molles, MSK, Rhumatologie, Anesthésie, Urologie, Vasculaire, Abdomen, Pédiatrie, Urgences etc.

CE 0197

TRAITEMENTS DISPONIBLES PENDANT L'EXAMEN

- Selection de la fréquence d'acquisition en BW, Doppler Pulsé et Couleur
- Echelle des vitesses
- Ajustement du nombre et de la position de la focale
- Ajustement automatique de l'image en un click

TRAITEMENTS DISPONIBLES APRÈS L'ACQUISITION

(Disponible durant l'examen et sur les images gelées, images enregistrées, séquences vidéo, pour un traitement a posteriori et une optimisation des images)

- Gain Général et en profondeur
- Gain Couleur et Doppler
- Ajustement de la Baseline
- Contraste dynamique
- Real Time Adapting Smoothing (RTAS®) pour augmenter la résolution et réduire la granularité
- Zoom continu X32 et défilement pour ajuster le champ de vision
- Mesures, calculs
- Textes, Annotations, bodymark

Notre gamme de réglages a posteriori la plus vaste au monde, vous permet de virtuellement refaire un examen alors même que votre patient a déjà quitté la salle. Accéder aux données préalablement enregistrés (images ou vidéo clips) et manipuler les en ayant recours à des outils jusque là réservés aux acquisitions actives.

*Equipements additionnels disponibles sur demande. Veuillez contacter votre représentant Sonsocanner pour la liste complète.



Interface conviviale et facile d'utilisation



5kg de haute technologie



Chariot dédié



Kit de connection pour 3 Sondes




Valise de transport dédiée

POLYVALENCE ET QUALITÉ D'IMAGE

Caractéristiques haut de gamme :

Avec Orcheo Lite bénéficiez des toutes dernières technologies numériques.


- 3D/4D exclusif avec rendu lumière et rotation des volumes
- Elastographie pour une meilleure estimation du risque
- Imagerie Panoramique en temps réel pour étendre le champs de vision au delà de toute limite

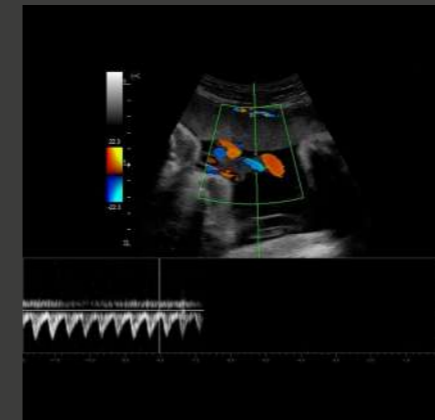


Triplex sur cordon ombilical



Veine Porte

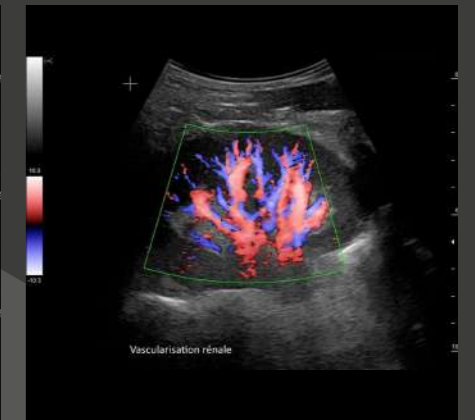


Rein

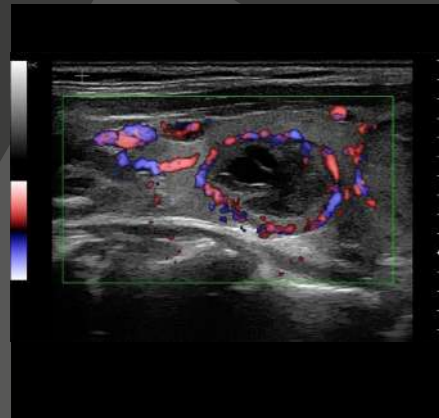


Nodule Thyroïdien




Calcification Thyroïdienne

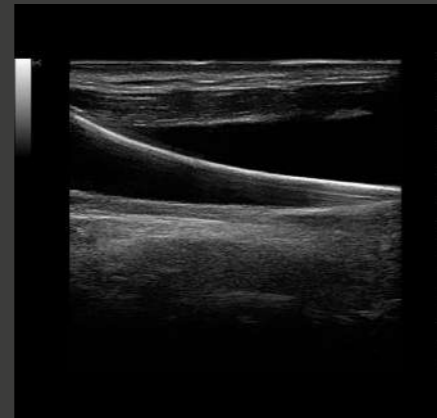

Cathéter

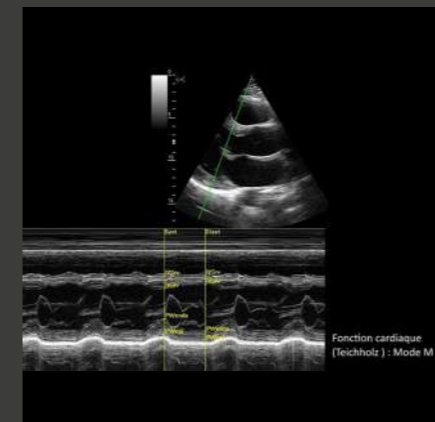

Mode TM : Ventricule gauche

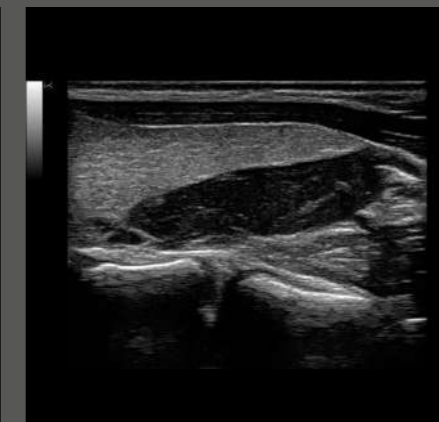

Adénome Parathyroïdien



Follicules ovariens


Options avancées




Cœur fœtal



Main du fœtus

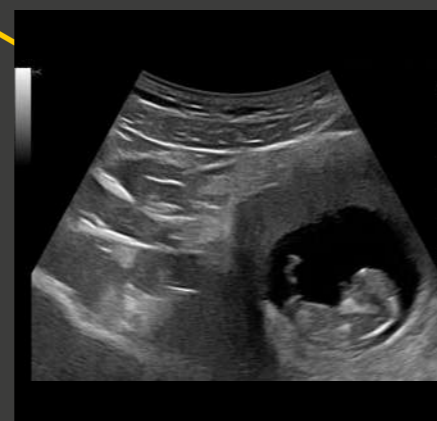

Début de grossesse

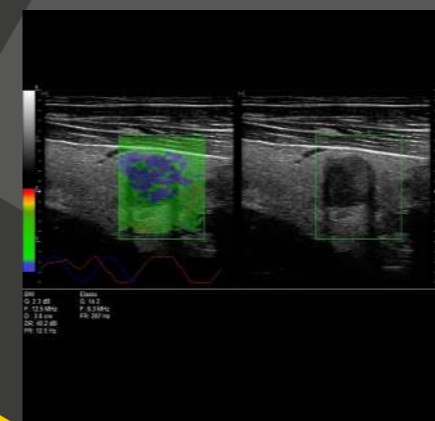

Elastographie: nodule thyroïdien



4D rendu HD



Vue panoramique des lobes thyroïdiens

Orcheo LITE

Sondes

Une large gamme de sondes électroniques à larges bandes donnant des images de haute qualité et avec une très grande sensibilité Doppler, dans un vaste choix d'applications cliniques.

Branchez la sonde à Orcheo Lite et le système reconnaîtra automatiquement le type de sonde connecté et chargera les réglages appropriés.



Sonde Convexe volumique 3D/4D 3-6 MHz Obstétrique, Gynécologie



Sonde Convexe 2-5 MHz Abdomen, Obstétrique, Gynécologie, Anesthésie, Vasculaire, Urgences



Sonde Linéaire HD Très haute fréquence 8-18 MHz Parties molles, Vasculaire, Anesthésie, MSK, Médecine du sport, Pédiatrie



Sonde linéaire 5-10 MHz Parties molles, Vasculaire, Anesthésie



Sonde endocavitaire 5-8 MHz Gynécologie, Obstétrique, Urologie



Sonde sectorielle Phased Array 1,5-5 Mhz Cardiologie, Urgences, Transcranien, Pédiatrie



Sonde micro convexe 4-9 MHz Pédiatrie, Urologie



Sonde « club de golf » 8-18 Mhz MSK, Anesthésie, Pédiatrie



Triple connecteur de sonde

SONOSCANNER SUPPORT & SERVICE

En établissant des partenariats de longue durée avec nos distributeurs locaux, nous nous assurons qu'un vaste éventail de services de qualité sera mis à votre disposition par nos équipes locales de techniciens certifiés.

• **Formation sur site :** Lors de la livraison, nos techniciens locaux vous apporteront la formation nécessaire pour que vous puissiez rapidement faire de votre échographe un élément à part entière de votre pratique.

• **Service client :** Notre service client local reste à votre entière disposition afin de répondre par email ou par téléphone, à toute demande de votre part.

• **Formation additionnelle :** Notre volonté de voir votre échographe relever les défis cliniques de demain pourra nous mener à effectuer des mises à jour importantes sur votre système.

• **Maintenance/Entretien :** Nous réalisons régulièrement des opérations de maintenance sur votre échographe afin de vous garantir sa longévité et son efficacité et donc un retour sur investissement optimisé.

Après de telles mises à jour, vous pourrez solliciter votre représentant Sonoscanner pour qu'il vous dispense la formation additionnelle qui vous sera nécessaire. Une telle formation sera réalisée soit sur site soit par téléphone.

Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à dispenser les meilleurs soins à vos patients

Sonoscanner se réserve le droit de changer à tout moment et sans avertissement préalable, toute spécification du produit décrit dans cette brochure. Veuillez contacter votre représentant Sonoscanner pour obtenir les informations les plus à jour sur les produits.



Veillez contacter un représentant de Sonoscanner pour une liste complète de sondes

Notre gamme de produits

Orcheo XQ

U-Lite



Un site en ligne dédié et sécurisé pour tous vos besoins de reporting avancé

www.sonoreplay.com

SonoReplay ouvre l'ère des échographes connectés. Accédez à vos examens de n'importe où

- Reporting intégral
- Gestion patient avancée
- Plus haute sécurité pour les informations stockées
- Accessible depuis n'importe quel appareil connecté





Fondé en 2003, Sonoscanner est le fruit de plusieurs dizaines d'années de recherche sur l'imagerie à ultrason menée initialement par l'université de Paris, France.

L'objectif principal lors de la fondation de Sonoscanner était de fournir aux praticiens de par le monde, les moyens de réaliser rapidement des diagnostics à la fois plus précoces et plus fiables. Cet engagement n'a depuis lors pas changé et Sonoscanner continue aujourd'hui à proposer des échographes portables et mobiles toujours plus performants, polyvalents et faciles à utiliser.

Implanté au coeur de la capitale française, Sonoscanner est un concentré de ce qui se fait le mieux en France en matière de technologie et de savoir-faire.

Afin de pouvoir offrir aux praticiens du monde entier, des produits de qualité inégalée, les échographes Sonoscanner sont développés à partir des technologies les plus modernes. Ils sont par ailleurs fabriqués et contrôlés en respectant les normes techniques les plus strictes.

En matière de distribution, Sonoscanner sélectionne soigneusement ses partenaires locaux de sorte de pouvoir offrir aux praticiens non seulement un produit exceptionnel mais aussi le service irréprochable dont ils ont besoin au quotidien.

Aujourd'hui les échographes Sonoscanner sont distribués de par le monde par notre réseau de distributeurs locaux avec qui nous œuvrons sur le long-terme.

Par une innovation constante au service des vrais besoins des professionnels de santé, notre mission est de rester pionnier en échographie compacte HD.



SONOSCANNER

6 rue André Voguet

75013 Paris - France

+33 9 54 97 15 57

contact@sonoscanner.com